



▶ Agitadores magnéticos RSLAB-1

- 1| Placa en acero inoxidable con o sin recubrimiento cerámico.
- 2| Motor con control electrónico de la velocidad, velocidad constante incluso con cambios de carga.
- 3| Elevada adhesión magnética que evita el descentrado del imán de agitación.

- 4| Motor sin escobillas que garantiza una larga vida de funcionamiento.
- 5| Circuito separado de seguridad, la calefacción se detiene automáticamente cuando la temperatura sobrepasa los 350°C (Modelo RSLAB-1C).
- 6| Protección de acuerdo con DIN EN 60529: IP42.

▶ Con calefacción RSLAB-1C



Referencia	LBB003	LBB005
Rango de velocidad	0-1500 rpm	
Volumen máximo de agitación	20 L	
Rango de temperatura	Ambiente - 340°C	
Material del plato	Recubrimiento cerámico	Acero inox.
Diámetro del plato	ø 135 mm	
Dimensiones aprox.	280 x 160 x 85 mm	
Peso aprox.	2,8 Kg	

▶ Sin calefacción RSLAB-1NC



Referencia	LBG003	LBG007
Rango de velocidad	0-1500 rpm	
Volumen máximo de agitación	20 L	
Material del plato	Cerámica	Acero Inox.
Diámetro del plato	ø 135 mm	
Dimensiones aprox.	280 x 160 x 85 mm	
Peso aprox.	2,8 Kg	

▶ Accesorios (no incluidos)



LBM006 Adaptador matraces f/ redondo 50 mL



LBM009 Adaptador matraces f/ redondo 500 mL



LBM007 Adaptador matraces f/ redondo 100 mL



LBM010 Soporte poly-bloc rojo con 11 orificios para tubos de 4 mL



LBM008 Adaptador matraces f/ redondo 250 mL




LBM011 Soporte poly-bloc violeta con 4 orificios para tubos de 20 mL



▶ Accesorios (no incluidos)



LBM012 Soporte poly-bloc azul con 4 orificios para tubos de 30 mL

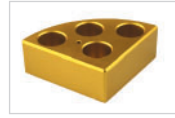

LBM015 Soporte poly-bloc dorado con 4 orificios para tubos de 16 mL



LBM013 Soporte poly-bloc negro con 4 orificios para tubos de 40 mL



LBM016 Soporte azul para 4 soportes poly-bloc



LBM014 Soporte poly-bloc verde con 6 orificios para tubos de 8 mL



LBM017 Anillo azul para 4 soportes poly-bloc



LBM018 Carcasa de protección resistencia hasta 135°