




## Ficha de dados

print date: 2026-01-30


## Incubadora Refrigerada (ST) STP 4 Smart

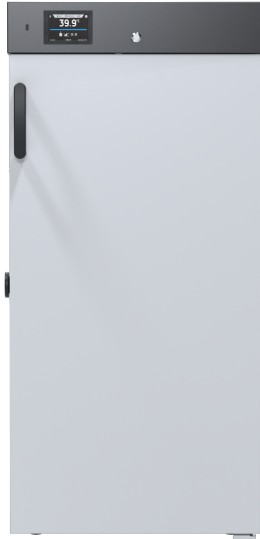

A foto acima é apenas para referência, pode mostrar opções adicionais não incluídas no equipamento padrão. A aparência real, particularmente a cor e a estrutura do material podem diferir das apresentadas na foto.

### Vantagens do controlador SMART:

- Ecrã sensível ao toque de 4,3", nítido e colorido
- Portas LAN e USB para transferência de dados
- Programas de tempo e temperatura multissegmentos
- Alarme visual e sonoro
- Memória interna para programas e armazenamento de dados
- Registo de eventos
- Manual do usuário para download direto
- Troca rápida de parâmetros do programa
- Barra de alarme
- Operação com luvas

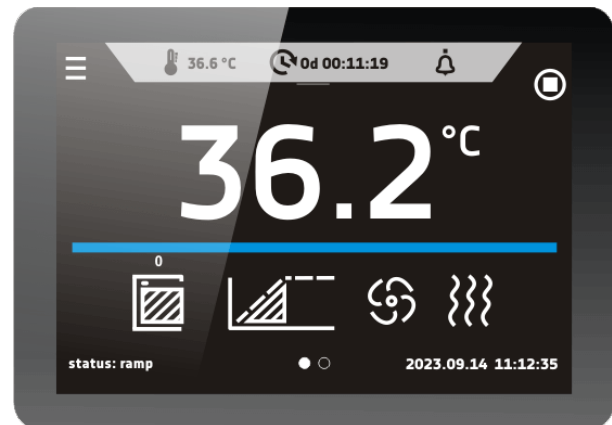

Smart - preview screen

**DADOS TÉCNICOS**

convecção de ar	forçada
capacidade da câmara [l]	259
capacidade de trabalho [l]	222
controlador	PID do microprocessador
ecrã	Ecrã sensível ao toque a cores de 4,3"

**TEMPERATURA**

Intervalo de temperatura [°C]	+3...+40 / +70 (opção)
resolução de temperatura a cada ... [°C]	0,1
flutuação de temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,1
variação de temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,3
proteção de temperatura	classe 1.0 conforme DIN 12880 / classe 3.3 (opcional)

**CÂMARA**

tipo de porta	petne / podwójne/5/ (opcja)
---------------	-----------------------------

**interior**

C Smart	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
CS Smart	aço inoxidável conforme DIN 1.4016
P Smart	aço inoxidável à prova de ácido conforme DIN 1.4301
PS Smart	aço inoxidável à prova de ácido conforme DIN 1.4301

**estrutura**


C Smart	chapa revestida a pó
CS Smart	aço inoxidável polido
P Smart	chapa revestida a pó
PS Smart	aço inoxidável polido

**Dimensões totais [mm] /1/**

largura A	600
altura B	1300
profundidade C	815

**Dimensões internas [mm]**

largura D	480
largura D'	520
altura E	1060
profundidade F	420
profundidade F'	480
profundidade G	320
altura H	840

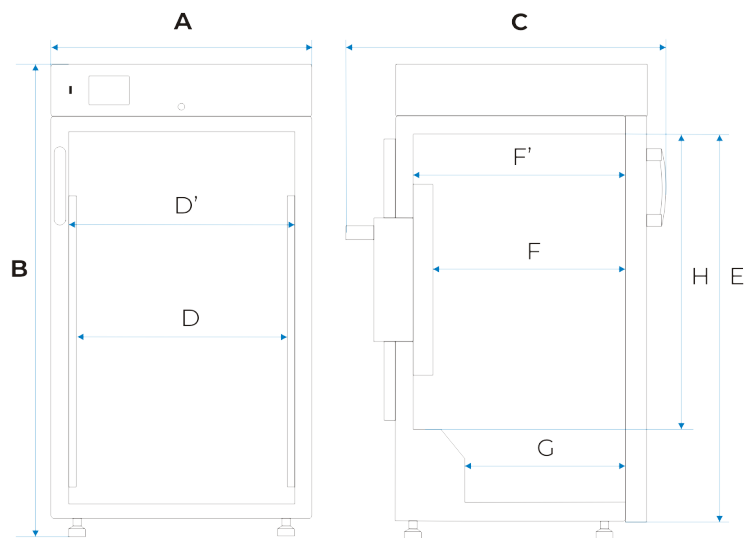

prateleiras (padrão   máx.)	4   6
carga de trabalho máxima na prateleira [kg] /2/	10
carga de trabalho máxima da unidade [kg]	50
peso [kg]	69



## PARÂMETROS ELÉTRICOS

Consumo de energia a 37°C [Wh/h]	70
tensão	230V 50/60Hz
potência nominal [W]	500
garantia	24 meses
fabricante	POL-EKO®

todos os dados técnicos acima referem-se a unidades padrão (sem acessórios opcionais)

\* - flutuação medida no centro da câmara; no espaço, variação (K) calculada para a câmara como:  $K = +/- (T \text{ média máx.} - T \text{ média mín.}) / 2$ ; parâmetros fornecidos para a câmara acima do degrau inferior

\*\* - outras fontes de alimentação mediante solicitação

1 - a profundidade não inclui 50 mm de cabo de alimentação, a largura não inclui 20 mm de plugue de borracha

2 - em superfície uniformemente carregada

3 - prateleira reforçada

4 - porta de vidro interna adicional

## OPÇÕES E ACESSÓRIOS




Número do pedido: \*/C

Porta interna de vidro




Número do pedido: \*/P INOX

Prateleira de rede em aço inoxidável INOX

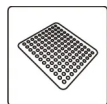


Número do pedido: \*/PP

Prateleira perfurada

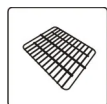


Número do pedido: \*/PW

Prateleira reforçada

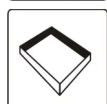


Número do pedido: KUW GN\*\*

Bandeja de aço inoxidável

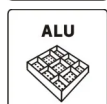


Número do pedido: ST/CHL/SWP ALU

Gaveta de alumínio com corrediças, revestidas a pó

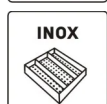

Número do pedido: ST/CHL/SWP INOX

Gaveta de aço inoxidável com corrediças, revestidas a pó

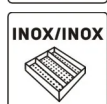

Número do pedido: ST/CHL/SWPN INOX

Gaveta de aço inoxidável com corrediças, de aço inoxidável



Número do pedido: QLK\*

Rodas




Número do pedido: \*PLUS

Função de descongelamento automático




Número do pedido: ST/70

Intervalo de temperatura estendida para 70°C

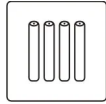

Número do pedido: \*/FOT

Sistema fotoperiódico

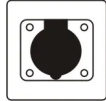


Número do pedido: GNZ

Tomada interna



Número do pedido LabDesk

Software LabDesk

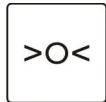

Número do pedido: BRT/\*/L ou IQ/OQ/PQ

Calibração e qualificação IQ, OQ, PQ



Número do pedido: \*/3.3

Proteção contra sobretensão classe 3.3 conforme DIN 12880




Número do pedido: BPP 12

Bateria de backup para exibição




Número do pedido: PORT ALARM

Contato de alarme seco

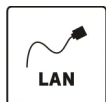

Número do pedido: LANK

Cabo LAN

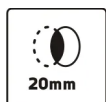

Número do pedido: OCZ/20

Porta de acesso não padronizada de 20 mm



Número do pedido: OCZ/30

Porta de acesso adicional 30 mm



Número do pedido: OCZ/60

Porta de acesso não padronizada de 60 mm



Número do pedido: OCZ/100

Porta de acesso não padronizada de 100 mm