




Densímetros

Ref. [KLG001_012](#), [KLG018](#), [KLG024](#), [KLG033_059](#), [KLG077_081](#)

Los densímetros son unos instrumentos de vidrio que se utilizan para determinar la densidad (en Kg/m^3) de cualquier tipo de solución. Consisten en un flotador lastrado con plomo del que parte un vástago graduado. Dicho flotador se hundirá más o menos en la solución a analizar dependiendo de la densidad de dicha solución (a mayor densidad, menos se hundirá el flotador). El punto en el que el líquido corta la escala del vástago indica la densidad de la solución. Nahita le ofrece esta completa gama de densímetros que cubren un amplio rango de medición para determinar la densidad tanto de líquidos más densos como menos densos que el agua.

Sin certificado de lote

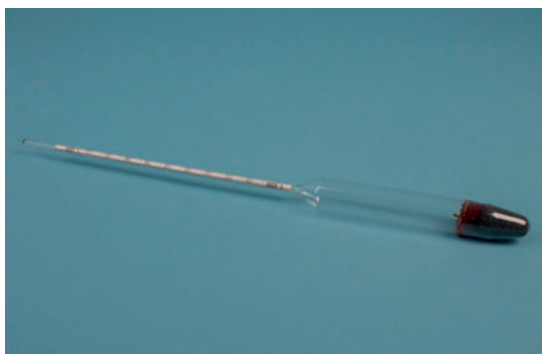

Referencia	Rango (Kg/m^3)	Divisiones	Longitud (mm)	Ø (mm)
KLG001	0,600-0,700	1	310	16
KLG002	0,700-0,800	1	310	16
KLG003	0,800-0,900	1	310	17
KLG004	0,900-1,000	1	310	17
KLG005	1,000-1,100	1	310	17
KLG006	1,100-1,200	1	310	17
KLG007	1,200-1,300	1	310	18
KLG008	1,300-1,400	1	310	18
KLG009	1,400-1,500	1	310	18
KLG010	1,500-1,600	1	310	19
KLG011	1,600-1,700	1	310	20
KLG012	1,700-1,800	1	310	20
KLG033	0,650-0,700	0.0005	270	21
KLG034	0,700-0,750	0.0005	270	21
KLG035	0,750-0,800	0.0005	270	21
KLG036	0,800-0,850	0.0005	270	21
KLG037	0,850-0,900	0.0005	270	21
KLG038	0,900-0,950	0.0005	270	21
KLG039	0,950-1,000	0.0005	270	21
KLG040	1,000-1,050	0.0005	270	21
KLG041	1,050-1,100	0.0005	270	21
KLG042	1,100-1,150	0.0005	270	21
KLG043	1,150-1,200	0.0005	270	21



Densímetros

Ref. KLG001_012, KLG018, KLG024, KLG033_059, KLG077_081

Sin certificado de lote

Referencia	Rango (Kg/m ³)	Divisiones	Longitud (mm)	Ø (mm)
KLG044	1,200-1,250	0.0005	270	21
KLG045	1,250-1,300	0.0005	270	21
KLG046	1,300-1,350	0.0005	270	21
KLG047	1,350-1,400	0.0005	270	21
KLG048	1,400-1,450	0.0005	270	21
KLG049	1,450-1,500	0.0005	270	21
KLG050	1,500-1,550	0.0005	270	21
KLG051	1,550-1,600	0.0005	270	21
KLG052	1,600-1,650	0.0005	270	26
KLG053	1,650-1,700	0.0005	270	26
KLG054	1,700-1,750	0.0005	270	26
KLG055	1,750-1,800	0.0005	270	26
KLG056	1,800-1,850	0.0005	270	26
KLG057	1,850-1,900	0.0005	270	26
KLG058	1,900-1,950	0.0005	270	26
KLG059	1,950-2,000	0.0005	270	26

Con certificado de lote

Referencia	Rango (Kg/m ³)	Divisiones	Longitud (mm)	Ø (mm)
KLG018	0,700-0,800	1	310	16
KLG024	0,800-0,900	1	310	17
KLG077	0,900-1,000	1	310	17
KLG078	1,000-1,100	1	310	17
KLG079	1,100-1,200	1	310	17
KLG080	1,200-1,300	1	310	18
KLG081	1,300-1,400	1	310	18